



Sugestão de locais

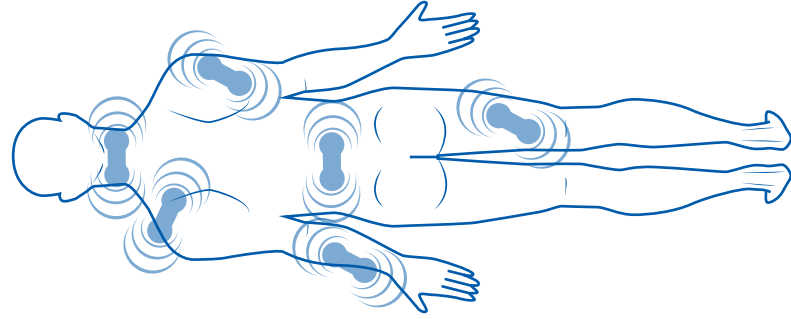


①

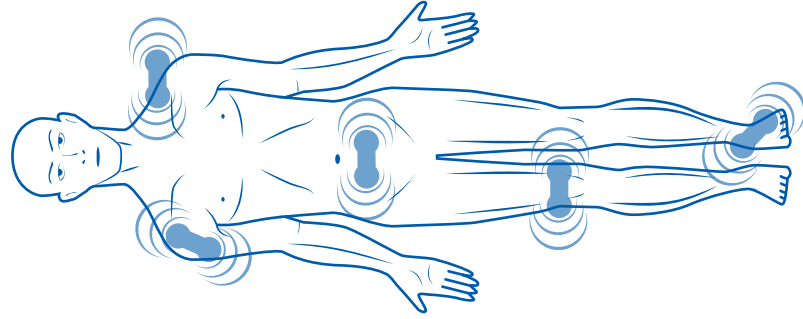

Retire o protetor dos géis e o TANYX® da embalagem. Não descarte esses protetores.

②

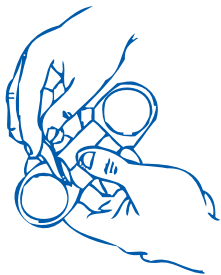


Coloque cada gel em cada eletrodo.



③




Limpe e seque o local da aplicação. Caso necessário retire o excesso de pelos.

④

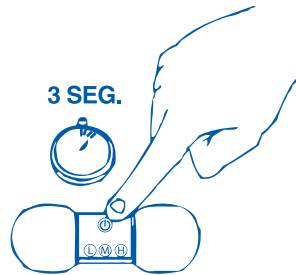

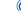
Ligar: Aperte o botão  por 3 segundos até a luz indicadora começar a piscar e escolha a intensidade L (Baixa), M (Média), H (Alta). Desligar: Aperte o botão  novamente por 3 segundos.

⑤

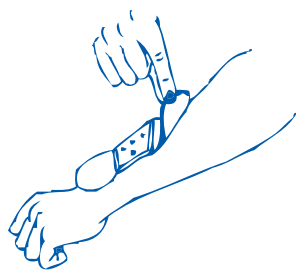

Após desligar, retire o TANYX® do local.

⑥

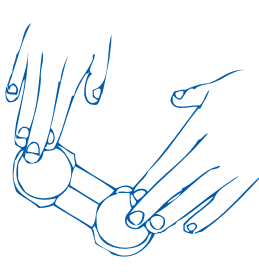

Recoloque 1 dos protetores (com a indicação "proteção") em cada gel, sem retirar os géis do TANYX®. Guarde-o na embalagem original.