

# TANYX

ADESIVO ELETRÔNICO PARA O ALÍVIO DA DOR

## Eficaz contra **DORES:**

Musculares

Articulares

Cólicas



Ação Imediata



Sem efeitos colaterais



Livre de Drogas



Portátil

**01** Tanyx Proporciona

**30** Aplicações de **20** minutos

## Manual de utilização rápida

1



Retire o TANYX® da embalagem e o protetor de cada gel. Não descarte esses protetores.

2



Fixe o gel sobre cada eletrodo.



3



Limpe e seque o local da aplicação. Se necessário retire o excesso de pelos.

4



Ligar: Aperte o botão  por 3 segundos até a luz indicadora começar a piscar e escolha a intensidade L (Baixa), M (Média), H (Alta). Desligar: Aperte o botão  novamente por 3 segundos.

5



Após desligar, retire o TANYX® do local.


6



Sem retirar o gel do aparelho, recoloque os protetores (escrito "proteção") em cada gel e acondicione seu TANYX® novamente no blister. Guarde-o na embalagem original.

## SUGESTÃO DE LOCAIS

Frente

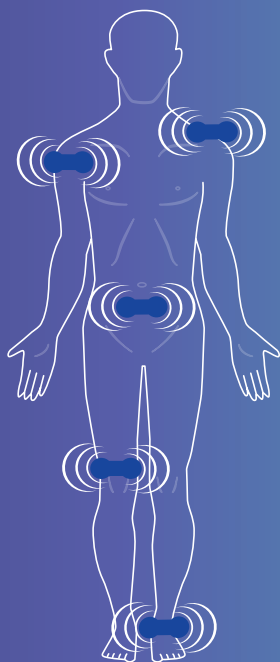

Costas

